

# Handi-Move Deckeninstallationen

Schienen- und Weichensysteme  
für jede Anforderung



## Freie Beweglichkeit im ganzen Raum

- Diskrete Lösung in jedem Innenraum.
- Lösung mit einer zurückhaltenden Optik, die sich in jede Art von Raum einfügt.
- Ästhetisches Design und warmweiße Farbe.
- Einfache Montage und Demontage.
- Montage direkt an der Decke, mit Wandhalterungen in Deckenhöhe, oder freistehend ohne Bohren. Eignet sich auch für temporäre Lösungen.
- Schienen und Weichen können auch fast vollständig in Zwischendecken eingelassen werden.
- Verwendung in Kombination mit Deckenlifter mit Deckenmotor oder Umhänge-Deckenlifter.



Schwenkweiche



Drehweiche



Traversensystem



Wand-zu-Wand Schienen



Freistehendes Schienensystem



Deckenschienen, Kurven,



## Partner Ihres Vertrauens

Handi-Move bietet Ihnen in jeder Phase der Zusammenarbeit einen perfekten Service. Deshalb entwickelte Handi-Move eine Betriebsphilosophie, die auf 'Erreichbarkeit' und 'Klarheit' basiert.

Vom ersten Rat bis hin zum letzten Benutzertipp: alles erfolgt in einer offenen Atmosphäre. Ganz egal was Ihr Problem ist, Handi-Move hat immer einen Mitarbeiter, der Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. Eine zuverlässige Begleitung beim Kauf, eine aufmerksame Bearbeitung der Bestellungen und ein professioneller Kundendienst, dies sind für Handi-Move ganz wichtige Punkte.



Analyse, Beratung und Unterstützung durch Ihren Vertragspartner vor Ort.  
Persönlich und nah, ohne lange Wartezeiten.

Kostenloses und detailliertes Angebot.



Professionelle Installation durch Ihren Handi-Move Vertragspartner vor Ort  
entsprechend aller Sicherheitsvorschriften.

Ausführliche Schulung und Inbetriebnahme.



Beste Garantiebedingungen, schnelle Ausführung von Reparatur und Wartung.  
Kontinuität im Service und ein Ansprechpartner in Ihrer Nähe.

In der Regel sind unsere Hilfsmittel eine Leistung der Krankenkassen.



## Schwenkweiche

### Leichtgängige Drei- oder Vierwege-Transfers

- Richtungswechsel innerhalb eines Raums oder einen Abzweig in andere Räume nehmen.
- Perfekt, um zum Beispiel direkt vom Bett zur Toilette zu gelangen.
- Schienen und Weichen können auch fast vollständig in Zwischendecken eingelassen werden.
- Als elektrische Version oder mit manueller Bedienung erhältlich.

### Elektrische Schwenkweiche:

- Optional mit drahtloser Fernbedienung.
- Keine separate Stromversorgung erforderlich (funktioniert über Batterie des Deckenmotors).





## Drehweiche

### Sanfte Richtungswechsel

- Richtungswechsel mit einem Deckenlifter in bis zu vier verschiedene Richtungen. Dies kann in kleinen Räumen nützlich sein, um zum Beispiel Toilette, Badewanne und Pflegeliege in einem Raum zu erreichen.
- Auch als Abzweig in mehrere Räume eine platzsparende Lösung.
- Optional mit drahtloser Fernbedienung.
- Keine separate Stromversorgung erforderlich (funktioniert über Batterie des Deckenmotors).
- Schienen und Weichen können auch fast vollständig in Zwischendecken eingelassen werden.



Alle Informationen mit Videos auf unserer Website  
[www.handimove.de/produkte/drehweiche](http://www.handimove.de/produkte/drehweiche)

# Traversensystem

Im gesamten Raum bewegen ohne abzusetzen



- Nahezu die gesamte Fläche eines Raumes in einem Transfer erreichen.
- Die parallelen Tragschienen können sowohl direkt an der Decke oder mit Wandhalterungen in Deckenhöhe montiert werden.
- Leichtgängige manuelle Version für den assistierten Gebrauch, ohne körperliche Anstrengung für die Betreuungsperson.
- Elektrische Version für betreute oder selbstständige Benutzung.



Alle Informationen mit Videos auf unserer Website  
[www.handimove.de/produkte/traversensystem](http://www.handimove.de/produkte/traversensystem)



## Traversenfangstück

In einen zweiten Raum mit dem gleichen Deckenlift ohne abzusetzen



- Optional zum Traversensystem.
- Ein integriertes Sicherheitssystem sorgt dafür, dass sich der Deckenmotor nur weiterbewegt, wenn beide Schienen verbunden sind.



## Wand-zu-Wand Schienen

### Zur Montage zwischen zwei Wänden

- Wenn eine Deckenmontage nicht möglich ist, beispielsweise aus statischen Gründen.
- Bis zu 7 Meter Spannweite serienmäßig.
- Jeder Einhängepunkt besitzt zweifache Sicherheitsfixierungen.
- Wird das System zeitweise nicht benötigt, kann es schnell auf- und abgebaut werden.




# Freistehendes Schienensystem

Ein Schienensystem ohne Verankerung



- Lösung ohne Bohren in Wände oder in die Decke.
- Als temporäre oder dauerhafte Lösung.
- Einfach anzubringen, zu bedienen oder zu entfernen.
- Die Breite und die Höhe werden je nach verfügbarem Platz angepasst.

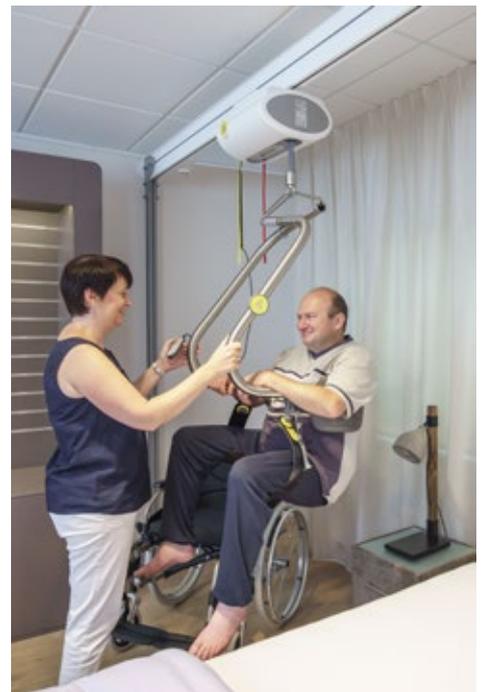



## Deckenschienen - Geraden und Kurven


Lösung mit einer zurückhaltenden Optik, die sich in jede Art von Raum einfügt

- Ästhetisches Design und warmweiße Farbe.
- Einfache Montage und Demontage durch Ihr Handi-Move Team.
- Schienen und Weichen können auch fast vollständig in Zwischendecken eingelassen werden.



Alle Informationen mit Videos auf unserer Website  
[www.handimove.de/produkte/deckenschienen](http://www.handimove.de/produkte/deckenschienen)

# HANDI-MOVE DECKENSCHIENEN

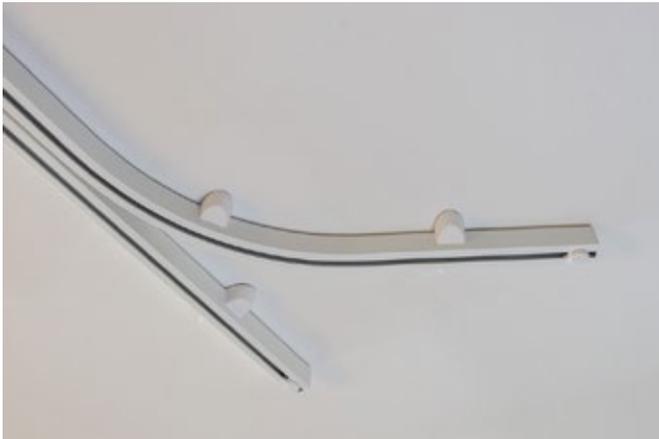



Umfangreicher Service für Privatpersonen und Einrichtungen.  
Wir sind in Ihrer Nähe und schnell vor Ort.

Artur Davignon davignon@info-handimove.de	D-04249 Leipzig T.: 0341 - 60 05 86 06
----------------------------------------------	-------------------------------------------

Christoph Zucker cz@handimove-nordost.de	D-12621 Berlin T.: 030 - 28 60 53 84
---------------------------------------------	-----------------------------------------

Dipl.-Ing. Ansgar Lünne luenne@handi-move.de	D-24568 Kaltenkirchen T.: 04191 - 9 52 49 21
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Daniel Kurowski hannover@handi-move.de	D-31275 Lehrte T.: 05175 - 9 84 99 93
-------------------------------------------	------------------------------------------

Gottfried Jagdfeld jagdfeld@handi-move.de	D-46483 Wesel T.: 0172 - 2 06 63 54
----------------------------------------------	----------------------------------------

Michael Rongen rongen@handi-move.de	D-52525 Heinsberg T.: 02452 - 9 67 62 52
----------------------------------------	---------------------------------------------

Dieter Ahrens ahrens@handi-move.de	D-66501 Kleinbundenbach T.: 0170 - 4 67 67 26
---------------------------------------	--------------------------------------------------

H. Armbruster GmbH Tatjana Robinson, Anja Ritzmann info@handi-move.de	D-72218 Wildberg T.: 07054 - 71 78
-----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

Jürgen Menges menges@handi-move.de	D-74838 Limbach T.: 06287 - 9 33 97 39
---------------------------------------	-------------------------------------------

Ausfelder-Neubauer GbR ausfelder@handi-move.de	D-92342 Freystadt T.: 09179 - 9 65 75 55
---------------------------------------------------	---------------------------------------------

**Österreich:**

Rehatronik GmbH office@rehatronik.at	A-3353 Seitenstetten T.: +43 7477 - 4 42 88
-----------------------------------------	------------------------------------------------